

Installationsanleitung auf DGAUM Selekt 2021Q2 für Windows

Hinweise:

Folgen Sie dieser Anleitung, falls Sie

- **DGAUM Selekt** erstmalig installieren möchten
- weitere Nebenarbeitsplätze installieren möchten

Um eine bestehende Installation von **DGAUM Selekt** zu aktualisieren, verwenden Sie bitte die entsprechende Update-Installationsanleitung.

Möchten Sie eine bestehende Installation um konfigurieren oder Server-Arbeitsplätze umziehen, wenden Sie sich bitte an unseren Support. Je nach Aufwand fallen hier Servicekosten an.

Download der gepackten Installationsdatei

Um die aktuelle Installationsdatei *install_dgaumselekt_2021Qx.exe* herunterzuladen, öffnen Sie bitte den Downloadlink den wir Ihnen per E-Mail versendet haben. Das dazugehörige Kennwort finden Sie im Brief „Zugangsdaten für das Abrechnungsportal“. Warten Sie ab, bis der Download vollständig abgeschlossen ist und speichern Sie *install_dgaumselekt_2021Qx.exe* auf Ihrem PC an einem bekannten Ort ab. Falls Sie nicht nach einem Speicherort gefragt werden, liegt die Datei im Ordner „Downloads“ auf Ihrem Rechner.

Erstinstallation von DGAUM Selekt in Ihrer Praxis

Falls **DGAUM Selekt** in Ihrer Praxis bereits im Einsatz ist und Sie lediglich einen weiteren Nebenarbeitsplatz installieren möchten, springen Sie bitte direkt zu „Installation eines Nebenarbeitsplatzes (Client)“.

Installationsarten

DGAUM Selekt kann in drei verschiedenen Betriebsarten installiert werden:

- als Einzelplatzprogramm (Standalone-Mode)
- als Hauptanwendung (Server-Mode)
Der Hauptarbeitsplatz stellt für Client-Arbeitsplätze die zentrale Datenhaltung zur Verfügung.
- als Nebenarbeitsplatz (Client-Mode)
Der Nebenarbeitsplatz ist mit der Hauptanwendung verbunden und legt dort seine Daten ab

Die Installationsarten „Server“ und „Standalone“ unterscheiden sich nur in wenigen Details und sind im Folgenden beschrieben.

Überlegungen zur Wahl des Hauptarbeitsplatzes (nur Server-Installation)

Als Hauptarbeitsplatz, also zur Installation der Server-Anwendung, bietet sich natürlich der physikalische Server der Praxis an. Da der Server aber oft entfernt steht oder im Falle eines nötigen Neustarts oder Aktualisierung der Anwendung für Praxispersonal nicht zugänglich ist, kann es praktischer sein, die Serverrolle von **DGAUM Selekt** an einem zentralen Arbeitsplatz der Praxis, beispielsweise an der Anmeldung, zu installieren.


HINWEIS: Auch wenn **DGAUM Selekt** nicht auf dem physikalischen Server, sondern z.B. an der Anmeldung installiert wird, ist es dennoch möglich, das Programmverzeichnis samt Datenbank auf ein Netzlaufwerk zu legen. Diese Experten-Installation wird später noch im Detail beschrieben.

Installation der Masteranwendung (Server oder Standalone)

Beginnen Sie am ausgewählten Arbeitsplatz. Liegt Ihnen *install_dgaumselekt_2021Qx.exe* vor, so starten Sie die Installation per Doppelklick auf die Datei.

Falls Sie gefragt werden, klicken Sie „Ausführen“, um die Installation zu starten.


Im folgenden Benutzerdialog wird Ihnen der Standard Ziel-Ordner zur Installation vorgeblendet.

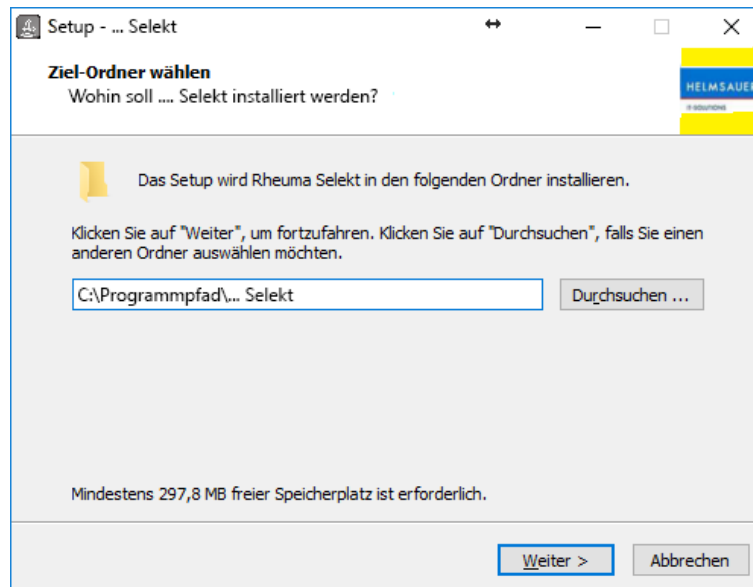



Hinweis: „Programmpfad“ ist natürlich nur ein Platzhalter und wird in Ihrer Praxis anders lauten. Als Standard ist das lokale Programmverzeichnis des jeweiligen Benutzers (%localappdata%) eingestellt. Sie können DGAUM Selekt jedoch auch auf einem Netzlaufwerk installieren. Stellen Sie sicher das DGAUM Selekt **in keinem Fall** unter „C:\Programme (x86)“ installiert wird.

Praxisgemeinschaften: Im Falle von Praxisgemeinschaften (getrennt abrechnende Ärzte) müssen für jeden Abrechner eigene Masteranwendungen in getrennten Verzeichnissen installiert werden, z.B. „I:\DGAUMSelekt_Arzt1“, „I:\DGAUMSelekt_Arzt2“, ...

Nach Auswahl oder Bestätigung des Installationspfades klicken Sie „Weiter“. Stellen Sie im folgenden Benutzerdialog „Zusätzliche Aufgaben“ sicher, dass die beiden Häkchen für Desktop Symbol und Schnellstartleiste gesetzt sind und klicken Sie dann auf weiter.

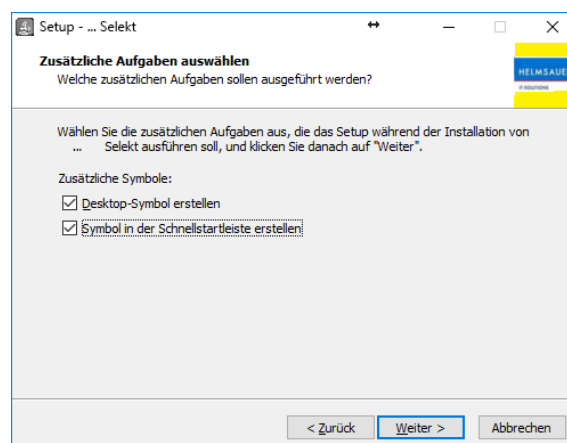

Der Verlauf der Installation wird Ihnen durch einen Fortschrittsbalken angezeigt. Sollte die Windows-Firewall-Meldung bei Ihnen erscheinen, müssen Sie unbedingt mit „Zugriff zulassen“ bestätigen!

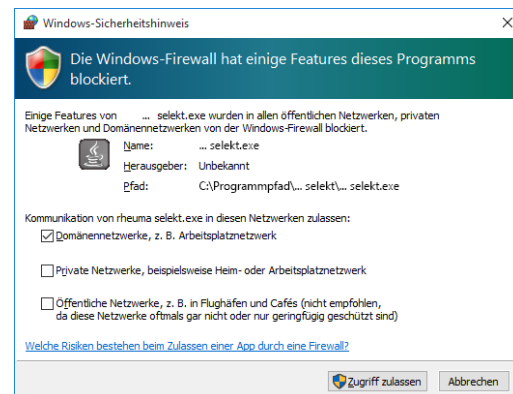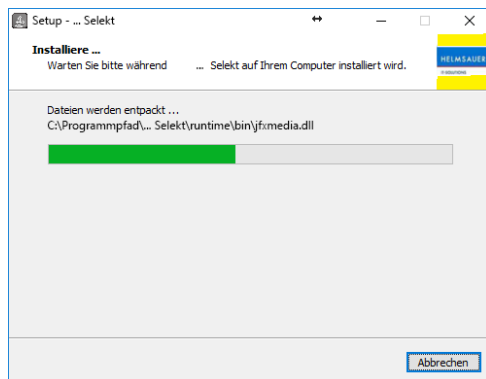

Konfiguration von DGAUM Selekt



Installationsart Standalone:

Wählen Sie im Konfigurationsmenü „Standalone“

Installationsart Server:

Wählen Sie „Server“ aus, klicken Sie „Weiter“ und belassen Sie den vorgeschlagenen Port 40003.

nur bei Installationsart Server:

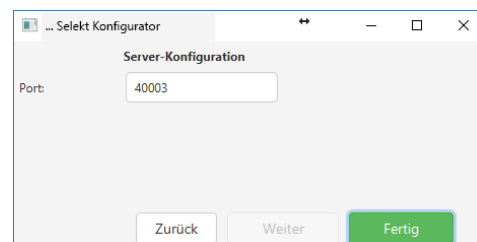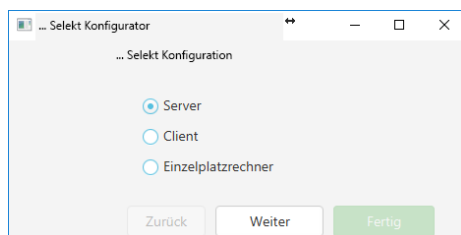

Praxisgemeinschaften: Im Falle von Praxisgemeinschaften (getrennt abrechnende Ärzte) muss pro Serveranwendung ein eigener Port definiert werden, z.B. „I:\DGAUM_Selekt_Arzt1“ auf Port 40003, „I:\DGAUM_Selekt_Arzt2“ auf Port 40004, ...

Nach Fertigstellung der Installation müssen Sie außerdem noch das Desktop Symbol eindeutig benennen.

Klicken Sie auf „Fertig“, um die Installation abzuschließen.

DGAUM Selekt startet nun automatisch und richtet beim ersten Start die Datenbank ein. Die in diesem Zusammenhang erscheinenden Statusmeldungen können Sie mit „OK“ bestätigen.

Installation eines Nebenarbeitsplatzes (Client)

Eine Client-Installation von **DGAUM Selekt** erlaubt Ihnen Zugriff auf den Datenstand des Master-Arbeitsplatzes (Server-Instanz). Dadurch können Sie zum Beispiel

- vom Behandlungszimmer Patientendaten oder die Leistungshistorie einsehen
- von einem ruhigen Büro aus Abrechnungen erstellen (Daten aufbereiten)
- von zuhause aus arbeiten


Hierzu müssen sich die Computer lediglich im gleichen Netzwerk befinden und die Master- oder Server-Anwendung gestartet sein.

Um eine neue Client-Anwendung zu installieren stellen Sie sicher, dass die Hauptanwendung (Server-Anwendung) gestartet ist.

Starten Sie die Installation durch Doppelklick auf die gespeicherte Zip-Datei *install_dgaumselekt_2021Qx.exe*, welche Sie heruntergeladen und abgespeichert haben.

Es öffnet sich ein Explorer-Fenster, aus dem Sie das eigentliche Installationsprogramm *install_dgaumselekt_2021Qx.exe* durch Doppelklick starten. Falls Sie gefragt werden, klicken Sie „Ausführen“, um die Installation zu starten.

Im folgenden Benutzerdialog wird Ihnen der Standard Ziel-Ordner zur Installation vorblendet.

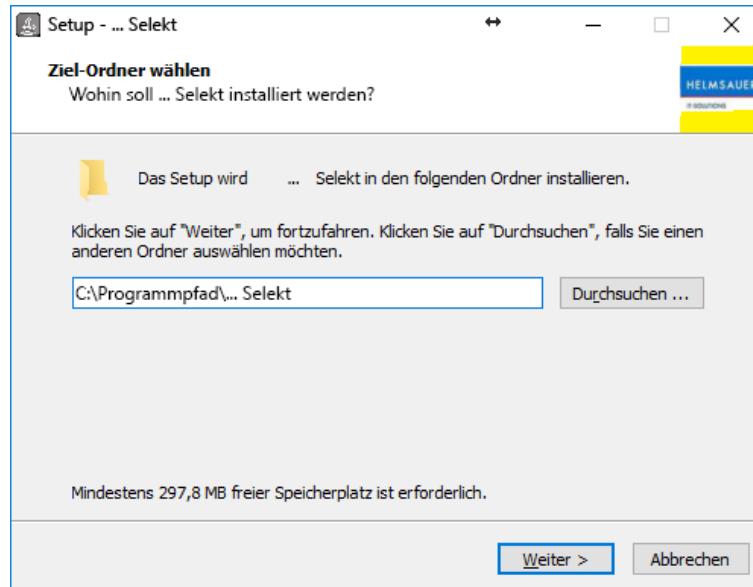


Hinweis: „Programmpfad“ ist natürlich nur ein Platzhalter und wird in Ihrer Praxis anders lauten. Als Standard ist das lokale Programmverzeichnis des jeweiligen Benutzers (%localappdata%) eingestellt. Außer im Rahmen einer Experten-Installation soll dieser Pfad **nicht** geändert werden!

Praxisgemeinschaften: Im Falle von Praxisgemeinschaften (getrennt abrechnende Ärzte) müssen für jeden Abrechner eigene Client-Anwendungen in getrennten Verzeichnissen installiert werden, z.B. „C:\Programmpfad\DGAUM_Selekt_Arzt1“, „C:\Programmpfad\DGAUM_Selekt_Arzt2“, ...

Nach Auswahl oder Bestätigung des Installationspfades klicken Sie „weiter“.


Stellen Sie im folgenden Benutzerdialog „Zusätzliche Aufgaben“ sicher, dass die beiden Häkchen für Desktop Symbol und Schnellstartleiste gesetzt sind und klicken Sie dann auf weiter.

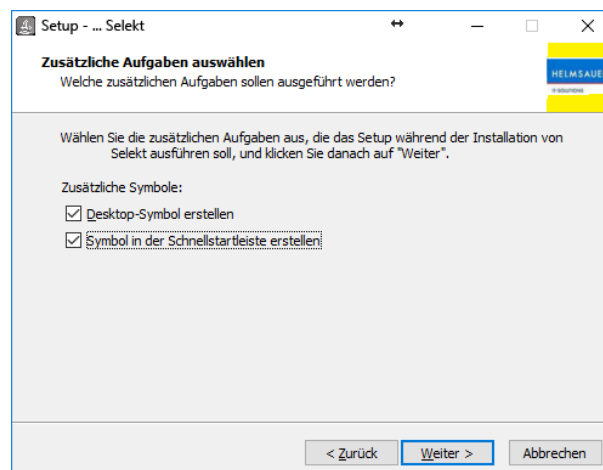

Der Verlauf der Installation wird Ihnen durch einen Fortschrittsbalken angezeigt.

Konfiguration von DGAUM Selekt

Wählen Sie nun die Installationsart „Client“ aus, klicken Sie „Weiter“ und geben Sie im Folgenden Servername und Port genauso ein, wie dies in der Titelleiste der Server-Installation angezeigt wird.

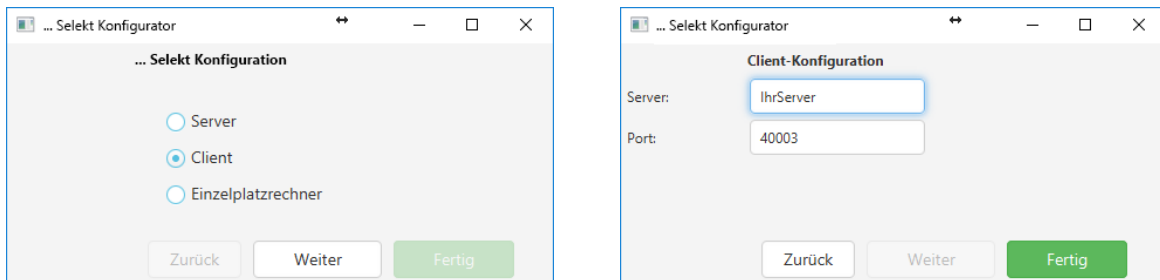

Der im Bild gezeigte Servername ist natürlich nur ein Beispiel. Bitte tragen Sie Servernamen und Port genauso ein, wie dies in der Titelleiste der Server-Installation angezeigt wird.

Praxisgemeinschaften: Wiederholen Sie die Client-Installation je Abrechner und passen Sie den Port entsprechend an.

Nach Fertigstellung der Installation müssen Sie außerdem noch das Desktop Symbol eindeutig benennen.

Fehlerfälle und Lösungsansätze

Gerne können Sie sich über unseren Support Assistent bei der Installation von **DGAUM Selekt** oder der Fehlersuche einholen. Sicherlich haben Sie Verständnis dafür, dass wir je nach Art der Unterstützung Kosten erheben müssen. Im Vorfeld können Sie folgende Punkte selbst prüfen oder sicherstellen:

Sollte sich die Client-Anwendung nicht mit der Masteranwendung verbinden, stellen Sie sicher, dass die Master-Anwendung (Server-Instanz) gestartet ist.

Bei Neuinstallationen ist zu prüfen, ob bei der Client-Installation der Servername (richtig) eingetragen wurde.

Die Konnektivität kann auch durch Netzwerkprobleme verhindert werden. Gehören die Client-Arbeitsplätze dem gleichen Netzwerk wie der Master-Arbeitsplatz an? Wird der Master-Arbeitsplatz (Serverinstanz) vom Client aus im Netzwerk gesehen? Klappt die Namensauflösung?

Hinweis: alternativ zum Servernamen (Hostname des Rechners mit der Hauptanwendung) kann auch die IP-Adresse als IPv4 als Servername eingegeben werden

Hinweis: verfügt der Master-Arbeitsplatz über mehrere Netzwerkadapter, so kann die primäre IP in der Systemkonfiguration der Masteranwendung festgelegt werden. Ergänzen Sie hierzu die Konfigurationsdatei „**dgaumselect.properties**“ um den Eintrag „LISTENADDRESS=nnn.nnn.nnn.nnn“.

In manchen Fällen kann auch eine Firewall die Ausführung und Verbindung behindern. Eine Ausnahmeregel (Eingehende Regel) für die ausführbare Datei der Masteranwendung sollte diesen Umstand beheben.

Sollte **DGAUM Selekt** nach dem Öffnen extrem verzögert oder gar nicht starten (Task sichtbar, aber kein GUI), so kann dies an fehlenden Rechten des Benutzers im Installationsordner liegen. Setzen Sie die Rechte des/der Benutzer/s auf Vollzugriff, damit die zum Betrieb notwendigen Log-Files und Arbeitsdokumente erstellt werden können.